

# Respireo

## Hospital F

Non Vented Reusable




Maschera  
riutilizzabile  
per più  
pazienti

La soluzione nata dalla nostra provata esperienza  
nella ventilazione non invasiva



- Permette una confortevole ventilazione non invasiva
- Garantisce la completa sicurezza per il paziente
- Tutela l'ambiente
- Maschera disponibile in 3 misure
- Misuratore applicato sulla confezione
- Il kit comprende maschera, cuscino e cuffia assemblati

## Indicazioni per l'applicazione

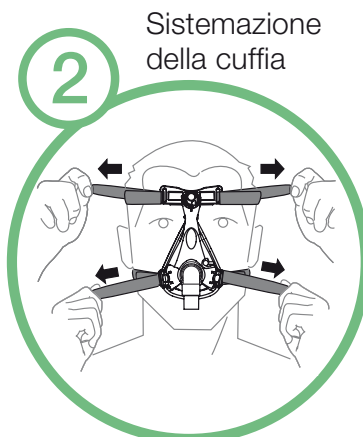

- Silicene biocompatibile
- Senza ftalati
- Senza lattice

Questa guida è destinata per l'utilizzo tra più pazienti della maschera in strutture ospedaliere, in laboratori clinici e del sonno. La presente guida definisce le procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione raccomandate e validate da Air Liquide Medical Systems in accordo alla norma UNI EN ISO 17664:2005.

<b>Decontaminazione</b>	Detergente con pH neutro	Aniosyme DD1 (diluito al 0,5%)	✓
<b>Disinfezione</b>	Alto livello termico	Secondo la normativa UNI EN ISO 15883-1: 70°C - 100min, 75°C - 30min, 80°C - 10min, 90°C - 1min Normativa Europea 93°C - 10min	✓
	Alto livello chimico	Seguire le istruzioni del costruttore: Opaster, Opaster Plus, Aniosept Activ (diluito al 2% in 5l di H <sub>2</sub> O) Anioxyde1000, Cidex OPA	✓
<b>Sterilizzazione</b>	Sterrad™	100S, NX, 100NX	✓
	Autoclave	121°C - 15 min (250°F)	✓

Respireo Hospital F Non Vented Reusable può essere disinfettata o sterilizzata per massimo 20 cicli. Per avere il protocollo di disinfezione e sterilizzazione completo, leggere la guida al riutilizzo disponibile sul sito web [www.airliquidemedicalsystems.com](http://www.airliquidemedicalsystems.com) o contattare il proprio rivenditore.

## Compatibilità con i ventilatori

	Monnal T50	Monnal T60	Monnal T75	Extend	Altri ventilatori (con valvola)
Compatibilità	✓	✓	✓	✓	✓

## Codici prodotto

## Taglia

<b>472545*</b>	Respireo Hospital F Non Vented Reusable	S
<b>472546*</b>	Respireo Hospital F Non Vented Reusable	M
<b>472547*</b>	Respireo Hospital F Non Vented Reusable	L
<b>472453</b>	Cuffia Monouso X10	



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l. - Via dei Prati 62 - 25073 Bovezzo (Brescia) Italy  
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551 - [www.device.airliquidehealthcare.com/it](http://www.device.airliquidehealthcare.com/it)