


La respirazione a portata di mano

Contatti

 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2098329

www.device.airliquidehealthcare.com/it



Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell'assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l'igiene e degli ingredienti specifici per la sanità. L'obiettivo della società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall'ospedale al proprio domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.

Leggere attentamente il manuale d'uso. Fabbricato da Air Liquide Medical Systems SA. Dispositivo medico di classe IIb. CE 0459

Air Liquide Medical Systems è impegnata in un approccio ambientale con un sistema di gestione della qualità ambientale certificato ISO 14001:2015. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web <https://www.device.airliquidehealthcare.com/our-commitments>

Non-contractual document: product may change at any time / N° 17/18 - 06/2020 - Photos: © ALMS, LeSquare, Getty, Eightcom, Design CHANTH TH

cod. 810425 rev. 04/2022




www.device.airliquidehealthcare.com

Progettato per le situazioni di emergenza



Impugnatura ergonomica di aggancio e trasporto

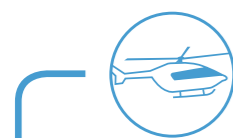

Trasporto aereo

- Omologazione per il trasporto aereo (norme EN 13718 e RTCA FO-160F)
- Resistenza 20G
- Compensazione automatica degli sbalzi di pressione atmosferica
- Luminosità regolabile dello schermo
- Allarmi ben visibili

Monnal T60® è stato progettato per gli interventi mobili in ogni contesto e per ogni necessità di cura intensiva, sia all'interno che all'esterno dell'ospedale.

Con Monnal T60, le équipes mediche hanno a portata di mano i più alti standard di ventilazione per i pazienti critici, sia adulti che bambini.

Monnal T60 è lo strumento ideale per medici ed operatori al fine di garantire un continuo perfezionamento dell'efficacia terapeutica:

- a bordo di unità mobili di soccorso terrestri e aeree
- nei trasporti tra reparti intra-ospedale
- nei centri di pronto soccorso, in sala rianimazione
- nei reparti di terapia intensiva e di rianimazione

Monnal T60 è facilmente adattabile a tutti gli ambienti che richiedono interventi di terapia intensiva in mobilità.



Monnal T60 risponde alle esigenze legate a situazioni difficili o estreme.

mobilità



I punti di forza di Monnal T60

- ⊕ **+ compatto e leggero:** 3,7 kg
- ⊕ **Autonomia di funzionamento:** 5 ore estensibili con batterie intercambiabili per assicurare continuità di intervento e aumentare le possibilità di trasporto
- ⊕ **Robusto e durevole:** protezione dei collegamenti e integrazione del gruppo espiratorio
- ⊕ **Accessori integrati:** sistema di fissaggio e di protezione per una configurazione ed uno spostamento ottimale del paziente:
 - postazione di ricarica a parete
 - borsa per il trasporto
 - supporto universale intra-ospedaliero
 - carrello con ruote bloccabili

Vicino al personale medico

Monnal T60 è la soluzione per un **accesso rapido e sicuro alle cure**. Fornisce un supporto respiratorio efficace nel minor tempo possibile. D'uso estremamente intuitivo, **Monnal T60** consente al personale medico di familiarizzare rapidamente con il ventilatore e di concentrarsi sul paziente.

I punti di forza di Monnal T60

- + **Connettori raggruppati e localizzati** per semplificare la preparazione del ventilatore
- + Custodia studiata per il **pre-collegamento dei cavi** e del circuito paziente
- + **Modalità automatica di emergenza** regolando semplicemente il sesso e l'altezza del paziente con calcolo automatico del peso (PBW*) per un avvio rapido e sicuro della ventilazione

*Predicted Body Weight: peso corporeo predetto



Connettori raggruppati e localizzati



Uso intuitivo

- Ampio schermo interamente touch
- Approccio all'utilizzo intuitivo: scelta, regolazione, convalida
- Menu contestuale



Vicino al paziente


Un monitoraggio preciso, completo e accessibile fin dai primi momenti di cura del paziente è fondamentale per la prognosi, il controllo e l'adattamento della terapia. Grazie alle sue complete funzionalità di monitoraggio, **Monnal T60** garantisce **una ventilazione sicura durante il trasporto del paziente**.

I punti di forza di Monnal T60

- + **Ampio schermo a colori** che consente la lettura delle informazioni in tutte le condizioni: luminosità regolabile, display a contrasto elevato, schermo invertibile di 180°
- + **Unica zona di monitoraggio** per seguire l'insieme delle informazioni sul paziente
- + **Schermo di monitoraggio allargato** con curve temporali
- + **Grandi spie di allarme luminose** facilmente identificabili in tutti gli ambienti, disattivabili in caso di bisogno



Allarmi luminosi ben visibili

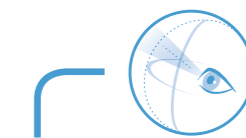

Sicurezza della ventilazione

- Monitoraggio della CO₂ espirata (opzione) per verificare la corretta intubazione del paziente e per monitorare in qualsiasi momento l'efficacia della ventilazione (tecnologia mainstream)
- Controllo automatico della Pressione di Plateau per la protezione polmonare del paziente

rapidità

visibilità

Sicurezza nella respirazione



Modalità automatiche di emergenza

Monnal T60 assicura elevata qualità fin dall'inizio della cura per la riuscita della terapia. Il personale medico può regolare efficacemente la terapia secondo la necessità del paziente: performante **ventilazione invasiva e non-invasiva**, **ventilazione automatica d'emergenza**; modalità a volume controllato, pressione controllata, pressione di supporto e CPAP.

Monnal T60 integra la piattaforma tecnologica Monnal che consente una transizione rapida dal pronto soccorso alla terapia intensiva.


I punti di forza di Monnal T60

- + Trigger accurati per il **comfort del paziente** e l'adattamento alla ventilazione non invasiva
- + Rilevazione e **compensazione automatica delle perdite**
- + Ampia possibilità di regolare la **frazione di ossigeno inspirata ventilazione d'apnea regolabile**



Turbina Monnal T60: tecnologia brevettata

- Flussi di punta di 230 l/min. per un supporto respiratorio efficace in NIV
- Pressurizzazione rapida per soddisfare al meglio la domanda inspiratoria del paziente
- Funzionamento silenzioso per un ambiente acustico confortevole (48 dBA a 1 m)

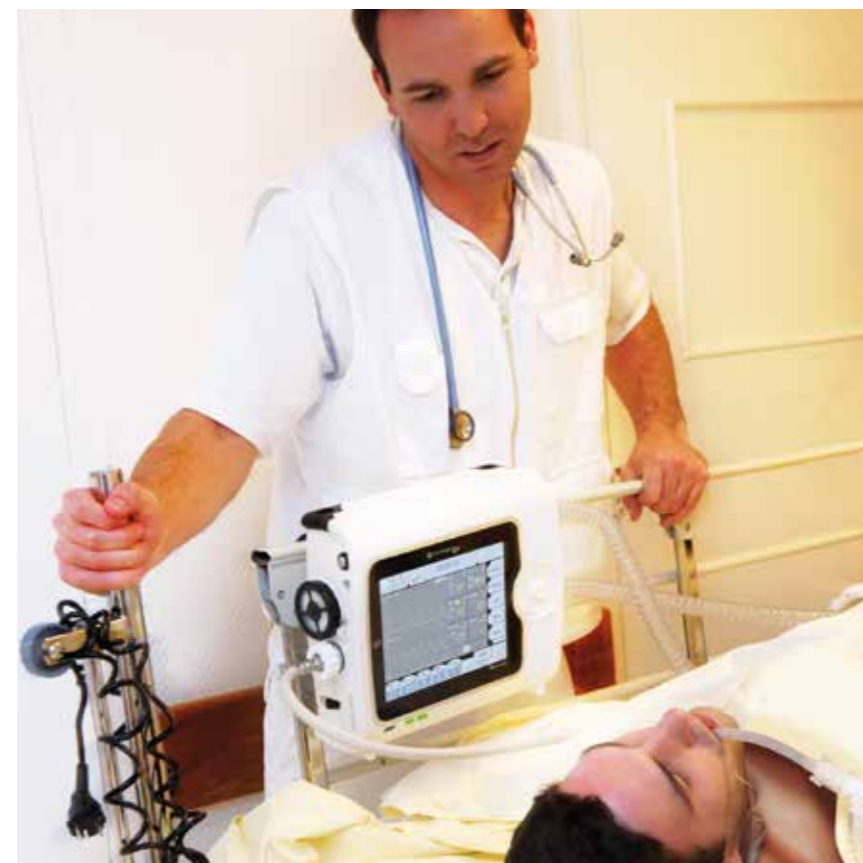

T60

Compatto
e leggero

Ampio schermo
touch a colori

Ampia zona di monitoraggio:
sicurezza della ventilazione

Zone di allarme
ben visibili e
disattivabili



Monitoraggio
della CO₂ espirata

Valvola espiratoria
Monnal EVA
Integrata e protetta

5 ore di autonomia

Manopola di regolazione
ergonomica:
rapidità d'uso

Regolazione della FiO₂
dal 21% al 100%

Gamma completa
di modalità di ventilazione:
invasiva e non invasiva

efficacia