

Codici prodotto

Respireo™ Hospital F Monouso

Codice Prodotto	Descrizione	Taglia	Codice distributore
472539	Respireo™ Hospital F Vented Disposable	S	KM226400
472540	Respireo™ Hospital F Vented Disposable	M	KM226500
472541	Respireo™ Hospital F Vented Disposable	L	KM226600
472542	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable	S	KM222100
472543	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable	M	KM222200
472544	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable	L	KM222300
472526	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable con valvola anti-asfissia	S	KM229132
472527	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable con valvola anti-asfissia	M	KM229133
472528	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable con valvola anti-asfissia	L	KM229134

Respireo™ Hospital F Riutilizzabile

Codice Prodotto	Descrizione	Taglia	Codice distributore
472545	Respireo™ Hospital F Non Vented Reusable	S	KM218800
472546	Respireo™ Hospital F Non Vented Reusable	M	KM218900
472547	Respireo™ Hospital F Non Vented Reusable	L	KM219000

Componenti di ricambio:

Codice Prodotto	Descrizione	Taglia	Codice distributore
472453	Cuffia Hospital x10	Unica	KM222400
472615	Cuscino Respireo™ Primo F/Hospital F x10	S	KM218500
472616	Cuscino Respireo™ Primo F/Hospital F x10	M	KM218600
472617	Cuscino Respireo™ Primo F/Hospital F x10	L	KM218700



Prodotto da:

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
Fax +39 030.209.83.29

Distribuito da:

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France

it.medicaldevice.airliquide.com

Respireo Hospital F Vented Disposable è una maschera oronasale con fori di esalazione calibrati destinata ad essere usata per brevi periodi di tempo (meno di 7 giorni) in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).
Respireo Hospital F Non Vented Disposable è una maschera oronasale senza fori di esalazione calibrati destinata ad essere usata, per brevi periodi di tempo (meno di 7 giorni) in ambiente ospedaliero, da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).
Respireo Hospital F Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve è una maschera oronasale senza fori di esalazione calibrati e con una valvola antisoffocamento, destinata ad essere usata per brevi periodi di tempo (meno di 7 giorni) in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).
Respireo Hospital F Non Vented Reusable è una maschera oronasale riutilizzabile senza fori di esalazione calibrati destinata ad essere usata in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

Dispositivo Medico classe IIa CE0051. Leggere le istruzioni per l'uso.

Respireo
Hospital F

Maschere oronasali per uso ospedaliero

Rev. 06/2023 cod. B10443

YK2303 - March 2023 version - Photos: © ALANS; GUSK; ehl; /Sbock - Design CHANH THI



La soluzione per beneficiare della nostra competenza nella ventilazione non invasiva



Le maschere oronasali Respireo™ Hospital F vengono fornite in versione **monouso** e **riutilizzabile**, sia con che senza perdite intenzionali (**vented** e **non-vented**), e sono state specificamente sviluppate per la **ventilazione non invasiva** ad uso ospedaliero.

Disponibili in **tre diverse taglie**, queste maschere sono progettate per garantire il comfort ad un'ampia gamma di pazienti e quindi per ottimizzare la tolleranza al trattamento.

Respireo
Hospital F

Un design studiato, semplice e sicuro

Cuffia regolabile
progettata per essere facilmente adattabile e conformarsi alle diverse forme del viso

Cuscino a doppio labbro in silicone
progettato per garantire una tenuta ottimale e comoda, adattandosi al viso del paziente

Clip a sgancio rapido
progettate per un facile fissaggio della cuffia e un rapido rilascio in caso di emergenza



Supporto frontale in silicone
progettato per garantire la stabilità della maschera e il comfort del paziente

Manopola di regolazione
progettata per regolare con precisione il supporto sulla fronte del paziente (16 posizioni possibili)

Corpo maschera trasparente
appositamente studiata per fornire una visuale ottimale per i medici

Porta di campionamento
per la misurazione della pressione

Il raccordo girevole a 360°
facilita il movimento e il posizionamento del tubo

Una vasta gamma di maschere per pazienti con esigenze diverse

Monouso
fino a 7 giorni



Senza perdite intenzionali (Non-vented)
con connettore femmina



Senza perdite intenzionali (Non-vented)
con valvola anti-asfissia e connettore femmina



Con perdite intenzionali (Vented)
con connettore maschio

Riutilizzabili
per uso su più pazienti



Senza perdite intenzionali (Non-vented)
con connettore femmina

Respireo
Hospital F




- Cuscino disponibile in 3 taglie (S, M, L)
- Supporto frontale reclinabile per una stabilità ottimale
- Confezione comprensiva di corpo maschera, cuscino, cuffia e misuratore di dimensioni


Istruzioni per il montaggio delle maschere Hospital F

Per prima cosa, utilizzare il misuratore presente nella confezione per determinare le corrette dimensioni della maschera per il paziente


1 Ruotare la manopola sull'estensione massima

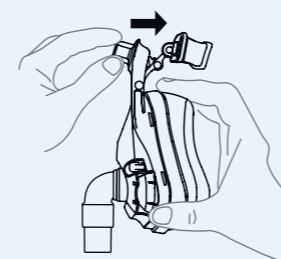

2 Posizionare la maschera sul viso del paziente

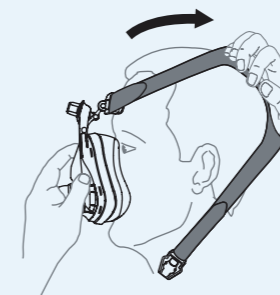

3 Regolare la cuffia per trovare il miglior comfort

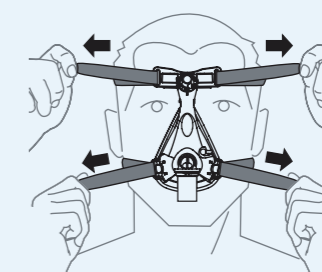

4 Ruotare la manopola per ottenere una tenuta ottimale

