

Codici

Respireo SOFT Nasal

| Codice | Descrizione | Taglia |
|--------------------------------|--|--------------|
| 472360 | Respireo SOFT Nasal | M |
| 472361 | Respireo SOFT Nasal | L |
| Componenti di ricambio: | | |
| 472471 | Cuffia UNIVEO | taglia unica |
| 472470 | Cuscino Respireo SOFT Nasal | M |
| 472473 | Cuscino Respireo SOFT Nasal | L |
| 472474 | Raccordo angolato Non Vented (Nasal Non Vented elbow)* | - |
| 472483 | Raccordo girevole grigio** | - |

Respireo SOFT Nasal Silent

| Codice | Descrizione | Misura |
|--------------------------------|--|--------------|
| 472365 | Respireo SOFT Nasal Silent | M |
| 472366 | Respireo SOFT Nasal Silent | L |
| Componenti di ricambio: | | |
| 472471 | Cuffia UNIVEO | taglia unica |
| 472470 | Cuscino Respireo SOFT Nasal | M |
| 472473 | Cuscino Respireo SOFT Nasal | L |
| 472474 | Raccordo angolato Non Vented (Nasal Non Vented elbow)* | - |
| 472483 | Raccordo girevole grigio** | - |

Inquadra qui
per maggiori
informazioni



 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Prodotto da

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11 - Fax +39 030.2000551
it.medicaldevice.airliquide.com

Respireo SOFT Nasal è una maschera nasale riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

Respireo SOFT Nasal Silent è una maschera nasale riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

Dispositivi medici di classe IIa. Leggere le istruzioni d'uso.

Dispositivo medico che cambia la destinazione d'uso del dispositivo nel seguente:

* Nasal Non Vented elbow è un raccordo destinato ad essere utilizzato sulle maschere Respireo SOFT Nasal, Respireo SOFT Nasal Silent, Alnest / Ineva N1 e Alnest / Ineva N1 Silent, per passare dalla configurazione Vented a quella Non Vented mediante la sola sostituzione del raccordo angolato.
Respireo SOFT Nasal, Respireo SOFT Nasal Silent, Alnest / Ineva N1 e Alnest / Ineva N1 Silent con montato il raccordo angolato Non Vented (Nasal Non Vented elbow) sono maschere nasali riutilizzabili senza fori di espirazione calibrati destinate ad essere usate a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

** Questo componente di ricambio è solo per la versione Vented.

Respireo **SOFT**
Nasal

Respireo **SOFT** Nasal
Silent

YN2134_IND1202311_Mask_EN Brochure Respireo SOFT Nasal_Soft Nasal Silent - Photos © ALIAS - Design CHANTHE - Cod. 80394 - Riv. 1/2024



Per godersi ogni momento

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

La chiave per un trattamento di successo sui pazienti.

La gamma Respireo SOFT renderà la vita più facile ai pazienti, offrendo un'esperienza d'uso ottimale.

Cuffia UNIVEO

- Disegnata per assicurare stabilità e distribuzione uniforme dei punti di pressione

Cuscino SOFT

- Si adatta naturalmente ai tratti nasali per un livello di comfort e tenuta ottimali notte dopo notte

Uncini ergonomici

- Permettono al paziente di rimuovere e indossare la maschera in modo facile e rapido

Bracci laterali flessibili

- Adattabili alle diverse conformazioni facciali per una perfetta stabilità, senza dover stringere troppo la cuffia

Corpo principale leggero e resistente

- Limita il fastidio dovuto al contatto della maschera durante la notte garantendo una tenuta perfetta e un campo visivo libero

Raccordo angolato e raccordo girevole

- Consentono una rotazione a 360° per una maggiore libertà di movimento

Disponibile anche con il Peace System® che garantisce perdite silenziose

- Questo sistema di esalazione assicura un flusso d'aria in uscita più diffuso e silenzioso

Respireo SOFT Nasal

Respireo SOFT Nasal Silent

Respireo SOFT Nasal

Respireo SOFT Nasal Silent

Principali punti di forza

Confortevole

- Cuscino con **tecnologia SOFT** che si adatta ai contorni del naso per ridurre la pressione sul ponte nasale, un'area altamente sensibile


Facile da usare

- Facile da indossare, regolare e pulire.
- Mantenimento della regolazione della cuffia predefinita dall'operatore sanitario, grazie agli uncini

- Garantisce un sonno tranquillo per il paziente e il suo/la sua partner grazie alla diffusione ottimale del flusso espiratorio


Diffusione silenziosa

Guida per l'applicazione

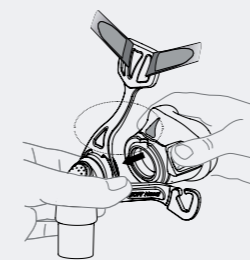


1

Montare il cuscino al corpo maschera aiutandosi con il sistema anti sbaglio. Avvicinare l'anello grigio del cuscino al corpo in modo da accoppiare prima la parte superiore del cuscino al dente superiore del corpo, poi appoggiare le dita e spingere per agganciare anche la parte inferiore del cuscino al corpo.

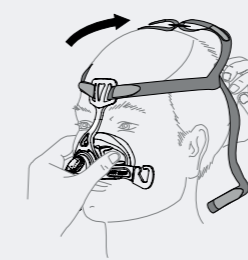


2

Tenendo la maschera delicatamente ferma sul viso, infilare la cuffia sulla testa assicurandosi che il cuscino aderisca al profilo intorno al naso

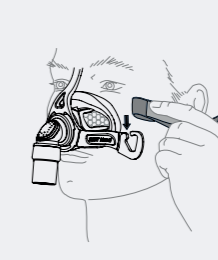

3

Agganciare agli uncini del corpo le due cinghie inferiori della cuffia in modo che passino sotto le orecchie.

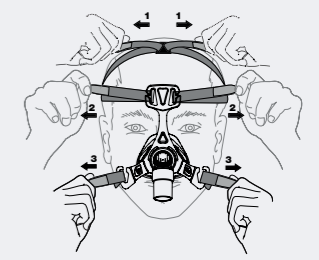

4

Tirare leggermente le cinghie per assicurare la stabilità della maschera secondo la sequenza sopra indicata. Collegare il raccordo rotante al tubo dell'apparecchiatura.