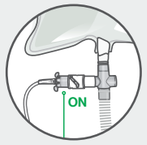
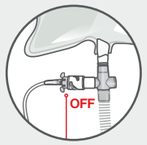
Caratteristiche tecniche

	PEEP	Flusso O_2	FiO_2
APERTO: Aria + O_2 	5 - 10 - 15 - 20 cmH_2O	> 5 L/min	50 - 60%
CHIUSO: 100% O_2 	5 - 10 - 15 - 20 cmH_2O	> 15 L/min	> 90%

Codici

Codice	Descrizione	Taglia della maschera
472850	Bag CPAP	N/A
472851	Bag CPAP set	S
472852	Bag CPAP set	M
472853	Bag CPAP set	L
472854	Bag CPAP set	Tutte le taglie (S-M-L)

YN24250_IND 1_2024 -02_Hospital ventilation_EN_Brochure Bag CPAP_ - Photos iStock: © Olko / Jane1e / Nattrass / Gorodenkoff - Design & Illustrations CHANH THI Cod. 810450 11/2024

Prodotto da

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11 - Fax +39 030.2000551
it.medicaldevice.airliquide.com

Bag CPAP set è un dispositivo monouso e monopaziente per la ventilazione non invasiva di pazienti che necessitano di terapia CPAP e una moderata o alta ossigenazione in ambiente ospedaliero o di emergenza. Bag CPAP set è destinato all'utilizzo su pazienti adulti (peso > 40 kg).

E' un dispositivo medico CE0051. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Bag CPAP

Gestire l'ossigeno, migliorare la cura.



Dispositivo di ventilazione non invasivo monouso per pazienti adulti *

* Peso > 40 kg

NEW

Made in Italy

- Efficiente
- **Economico**
- **Innovativo**
- Facile da utilizzare

Bag CPAP

La nuova soluzione progettata per trattare l'insufficienza respiratoria acuta de novo, fornendo FiO_2 moderata o elevata, ottimizzando il consumo di ossigeno.

La Bag CPAP è unica, ed è in grado di **far fronte a tutte le sfide** che una maschera CPAP deve affrontare.

Trattare l'insufficienza respiratoria acuta de novo[1]

La Bag CPAP è ottimale per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta de novo grazie a 2 parametri indipendenti.

FiO_2 50% o 90%

PEEP* da 5 a 20 cmH_2O


La Bag CPAP eroga 2 livelli di FiO2 grazie ad un sistema Venturi:

- **FiO_2 moderata** (50-60%) ottenuta con una portata di ossigeno di almeno 5L/min.
- **FiO_2 elevata** (90-100%) ottenuta con una portata di ossigeno di almeno 15L/min.

La sacca ossigeno garantisce FiO_2 indipendentemente dalla richiesta respiratoria del paziente.

La Bag CPAP consente di erogare una pressione positiva di fine espirazione (PEEP) compresa **tra 5 e 20 cmH_2O** grazie ad una semplice valvola PEEP.

Basso consumo di ossigeno[1]

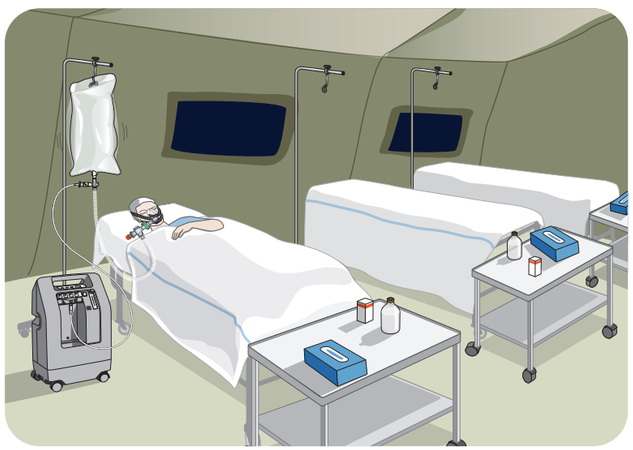

La Bag CPAP ha le proprietà di risparmio di ossigeno più elevate rispetto ad altri dispositivi CPAP presenti sul mercato[1].

La Bag CPAP è progettata per **ridurre il consumo di ossigeno** e consente il **trattamento di più pazienti** quando le risorse di ossigeno sono limitate. Ciò rafforza la sua utilità in luoghi in cui l'accesso all'ossigeno è difficile come nei paesi a basso e medio reddito o in situazioni di emergenza.

*PEEP: Pressione positiva di fine espirazione

[1] de Beaufort E, Carteaux G, Morin F, et al. Una nuova CPAP basata su serbatoio a basso consumo di ossigeno: la sacca per CPAP. Crit Care. 2023;27(1):262. Pubblicato il 4 luglio 2023 doi:10.1186/s13054-023- 04542-2


Facile e sicura da usare

Un dispositivo sicuro e facile da usare è essenziale per fornire una buona assistenza ad un paziente in una situazione di emergenza o in un ambiente ristretto con molto turnover e mancanza di professionisti sanitari.



Controllo visivo:
Un semplice controllo sulla sacca ossigeno consente di vedere se il paziente sta ricevendo ossigeno.

Una sacca ossigeno appositamente non elastica:
Rimane gonfiata in caso di perdite o distacco della maschera per mantenere la riserva di ossigeno.

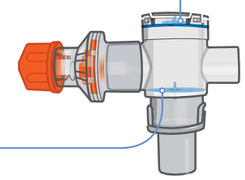

Valvola antiasfissia:
Comfort per il paziente in caso di aumentata richiesta respiratoria.

Valvola di non ritorno:
Il gas espirato (CO_2) viene espulso nell'ambiente.
Il paziente non può respirare la propria CO_2.


Progettata in 3 parti, per migliorare le sue prestazioni

Sacca ossigeno
- Accumulatore
- Buffer

La sacca ossigeno e il sistema Venturi, un modo semplice per gestire l'ossigeno



2 tipi di fornitura ossigeno, da utilizzare in ambienti precari

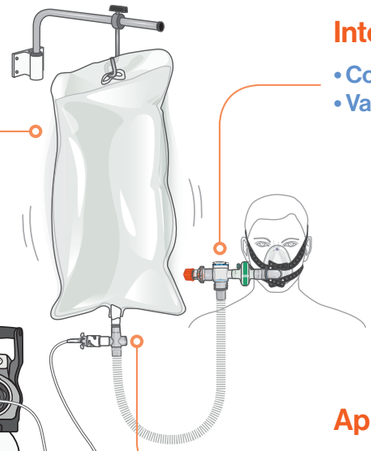

Interfaccia paziente
- Collegamento maschera
- Valvola PEEP regolabile

Adatto ad ogni tipo di maschera*

Apporto di ossigeno
- FiO_2 moderata, anche tramite: Concentratore (da 5 L/min O_2)
- FiO_2 alta: Bombola di ossigeno (da 15 L/min O_2)

* Maschera di ventilazione non invasiva senza perdite intenzionali.